

EV29L Steril Olmayan Yeniden Kullanılabilir PrecisionPoint Adaptörü için Hızlı Referans Kılavuzu

1. İlk ve Her Kullanımdan Önce Yeniden İşleme

a. Temizlik, Cidezyme 5 dakika

- Kanallar/kanüller için uygun bir fırça kullanın
- Tüm kanallardan/kanüllerden temizleyici geçirin
- Temizliğin ardından 5 dakika boyunca durulayın.

b. Sterilizasyon


• Sterilizasyon: B sınıfı otoklav

- 3 dakika boyunca 134°C (273°F)
- 4 dakika boyunca 132°C (270°F)

c. Yeniden işleme sonrası inceleme (görünür çatlak, renk değişikliği veya hasar yok)

2. EV29L Probuna Takma

Plastik adaptörü kılıfın üstüne takın. PrecisionPoint kılavuzunun her bir kolunu adaptörün yanlarına takın. PrecisionPoint kılavuzu tek kullanımlıktır ve üreticinin Kullanım Talimatlarına göre kullanılmalıdır.

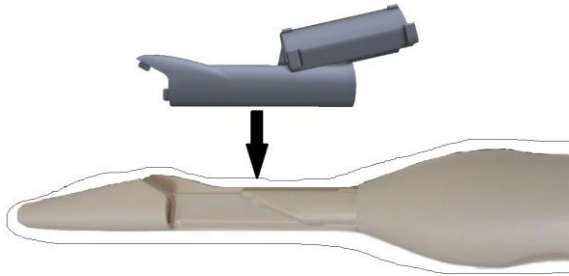

2a



2b



2c

3. Çalışma Ömrü

EV29L Steril Olmayan Yeniden Kullanılabilir PrecisionPoint Adaptörü, uygun bakımla kullanıldığında, çalışma ömrü olarak 3 ay veya 75 yeniden işleme döngüsü (hangisi önce gelirse) için tasarlanmıştır.

Ayrıntılı Talimatlar için aşağıdaki Kılavuzlara bakın:

Adım	Kılavuz	Kılavuz Kısmı
1. Yeniden İşleme (ilk ve her kullanımdan önce)	EV29L için Bakım, Temizlik ve Kullanım Kılavuzu	Kısım 4: Yeniden işleme Kısım 3.2, 3.3 ve 3.5: Yeniden Kullanılabilir İğne Kılavuzları ve Aksesuarlarının Yeniden İşlenmesi* * Temizlik, Sterilizasyon ve İnceleme talimatları EV29L Yeniden Kullanılabilir PrecisionPoint Adaptörü için de geçerlidir.
2. EV29L Probuna Takma	EV29L için Bakım, Temizlik ve Kullanım Kılavuzu	Kısım 3: Görüntüleme için Hazırlık Kısım 2.1.1: İğne Kılavuzunun Takılması* * Bu talimatlar EV29L Yeniden Kullanılabilir PrecisionPoint Adaptörü için de geçerlidir.

ExactVu™ mikro-ultrason sisteminiz veya EV29L Yeniden Kullanılabilir PrecisionPoint Adaptörü ile ilgili **teknik yardıma** ihtiyacınız varsa, Exact Imaging Teknik Destek ile iletişime geçin. Bölgenizin iletişim bilgilerini bulmak için bakınız <https://www.exactimaging.com/contact-us>.



Exact Imaging Inc.

7676 Woodbine Avenue, Unit 15
Markham, ON L3R 2N2, Kanada
+1.905.415.0030
info@exactimaging.com



Emergo Europe

Westervoortsedijk 60
6827 AT Arnhem
Hollanda



MedEnvoy Switzerland

Gotthardstrasse 28
6302 Zug
İsviçre

Birleşik Krallık Sorumlu Kişisi
Emergo Consulting (UK) Limited c/o Cr360 - UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ Birleşik Krallık



Exact Imaging BVBA

Ottergemsesteenweg-Zuid 808 / b508
9000 Gent
Belçika

Exact Imaging Katalog Numaraları

- EV-29L: EV29L Probu
- EV-BIOGR-PP: EV29L Yeniden Kullanılabilir PrecisionPoint Adaptörü
- EV-SYS-220: ExactVu™ Mikro-Ultrason Görüntüleme Sistemi (220 V)
- EV-SYS-120: ExactVu™ Mikro-Ultrason Görüntüleme Sistemi (120 V)
- EV-SYS-100: ExactVu™ Mikro-Ultrason Görüntüleme Sistemi (100 V)